

## Használati útmutató

# Dr. SONIC

## Összecsukható szájuhany

### L-13



Forgalmazó: E-Hall kft.  
[info@e-hall.hu](mailto:info@e-hall.hu)  
<https://e-hall.hu/>



Köszönjük, hogy ezt a Dr. Sonic terméket választotta. Kérjük olvassa el és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.


### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Fontos a használati utasítás megértése és betartása az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Ezért kérjük, feltétlenül sajátítsa el a készülék rendeltetésszerű használatát, és őrizze meg az útmutatót.
- Kérjük csak rendeltetésszerűen használja a készüléket (szájhygiéniai célra fejlesztett készülék). A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéshez vezet!
- A készülék szétszerelése, otthoni javítása tilos, áramütés veszélyét hordozza, és garanciaszáttal jár. Amennyiben működési hibát tapasztal, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!
- Ne töltsön 40 °C feletti hőmérsékletű folyadékot a tartályba, hogy elkerülje az égési sérüléseket!
- Ne merítse vízbe a készüléket, az tüzet, áramütést, robbanást okozhat.
- Töltés közbeni véletlen vízbejutás esetén azonnal húzza ki az adapter a hálózati csatlakozóból, és csak ezután vegye ki a készüléket a vízből!
- Ne használjon sérült vezetékot vagy adaptert, cserélje ki a sérült kelleket!
- Sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Tartsa távol tűztől, és ne töltsön vagy tárolja hőforrás közelében!

### EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne nyomja a fúvókát a fogakhoz vagy az ínyéhez erősen, hogy elkerülje a sérülést.
- A készüléket biztonságos helyen tárolja, hogy elkerülje a vízbeesést, vagy a leesés következtében okozott mechanikai sérüléseket.
- Ne próbálja meg a töltőkábelt fel- vagy lecsatlakoztatni vizes kézzel.
- A töltéshez a helyi hálózathoz illeszkedő adaptert használjon.
- A töltőkábelt ne alakítsa át, ne rongálja meg, kerülje annak túlzott nyújtását, erős hajlítását, csavarását, továbbá ügyeljen, hogy ne helyezzen rá nehéz tárgyat, és ne szorítsa más tárgyak közé!
- Tisztítás és használat előtt húzza ki a töltőkábelt a készülékből!
- Tárolja nem túl meleg, nem túl páras helyen, ne tegye ki erős napfénynek.
- Kerülje a meleg, páras helyeken történő töltést, mint pl. fürdőszoba.
- Ha a készüléket sokáig nem használja, húzza ki a kábelt és az adaptert.
- A készülék nem tartalmaz cserélhető vagy javítható alkatrészeket. Üzemzavar esetén kérjük, keresse fel a forgalmazót.
- Ne használja a készüléket fúvóka nélkül!
- Egyes szájvizek korróziót okozhatnak a készülékben, kérjük kerülje a szájvíz használatát!
- A terméket felnőttek számára fejlesztették, gyermekek számára az önálló használata tilos! Mozgásukban vagy mentális képességükben korlátozott személyek és gyermekek csak felelősségteljes felnőtt felügyelete mellett használhatják, miután megfelelő irányutatót kaptak a felnőttől a készülék biztonságos használatát illetően!
- Ez a készülék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
- Fogínybetegségben szenvedő, valamint 2 hónapon belül szájsebészeti beavatkozáson átesett betegek kérdezzék fogorvosukat a szájuhany használatának javallatáról!
- A kábel eltávolításakor a vezeték helyett a dugót húzza!

### A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

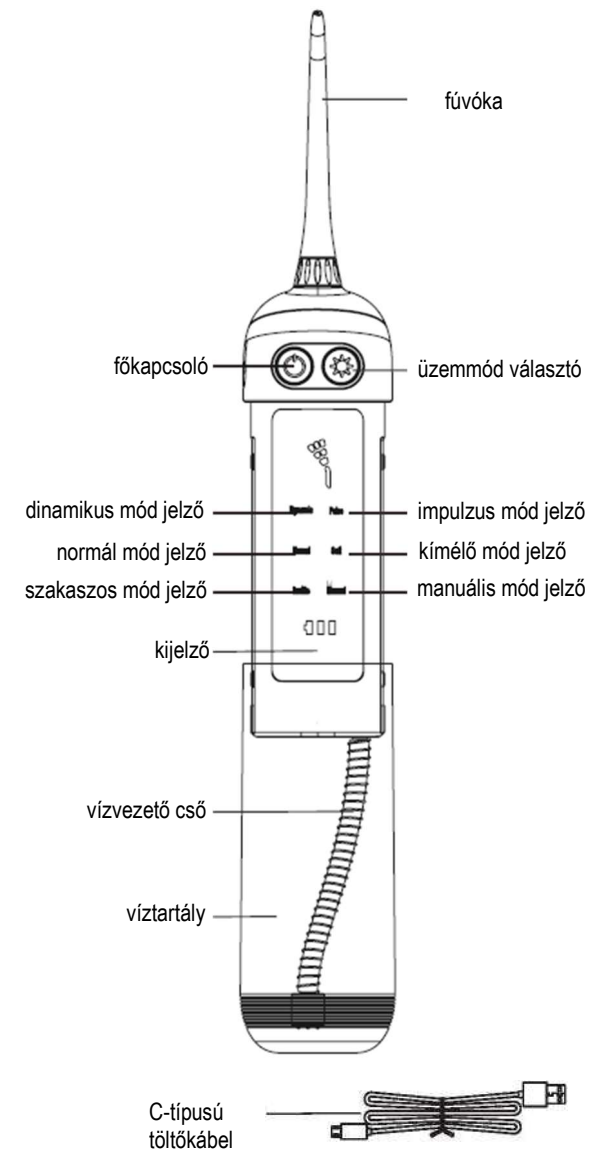

### Tartozékok

Standard fúvóka: napi tisztításhoz.

Nyelvtisztító: Nyelvre tapadt lepedék eltávolítására.

Fogínytasak fúvóka: speciálisan az íny alatti terület tisztítására.

Fogszabályozó fúvóka: fogszabályozók, pótlások tisztítására.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Használat előtt töltsse fel a készüléket az alábbiak szerint.

1. Keze, a készülék, a vezeték legyenek szárazak. Csatlakoztassa az USB csatlakozót 5V-os adapterhez (a csomag nem tartalmazza, a legtöbb mobiltelefon-töltő rendelkezik ilyen adapterrel), és csatlakoztassa a hálózathoz.

2. Nyissa ki a töltőfedelelet, és csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a készülékhez.

### Javaslatok:

Amennyiben a jelzőfény az jelez, az akkumulátor merülőben van, kérjük töltsse fel a készüléket.

A teljes töltési idő 3-4 óra, ezalatt a fények jelzik, hol tart a folyamat. A teljes töltés elérésével a villogás leáll.

### A szájuhány használata:

1. Csatlakoztassa a fúvókát a készülék végén lévő nyíláshoz. A fúvóka cseréjéhez nyomja a kioldógombot.

2. Töltsön vizet a tartályba az alábbi módszerek közül választva:

a. Egyik kezében a készülék testét tartva, másik kezével húzza le a tartályt (könnyebb, ha előtte kinyitja a tartályfedelelet.) Első alkalommal előbb távolítsa el a ragasztó-fóliát. Töltsse fel a tartályt, majd illesse össze a két részt.  
b. Nyissa ki a tartályfedőt, tartsa függőlegesen a készüléket, töltsse fel a tartályt, majd csukja vissza a fedelet.

3. Válassza ki a kívánt üzemmódot az üzemmód-választó (☀️) gomb megnyomásával. Az üzemmódot működés közben is átállíthatja.

### Az alábbi üzemmódok közül választhat:







**Dynamic:** Erős vízszugár, kezdők számára nem javasolt.

**Pulse:** Változó erősségű vízszugár a mélytisztítás érdekében, és a fogíny masszírozásával.

**Normal:** Folyamatos, közepes erősségű vízszugár, a napi tisztításhoz.

**Soft:** Gyengéd kíméletes vízszugár, érzékeny fogak és íny tisztítására.

**Burst fire:** Pontos, precíz vízszugár, főleg

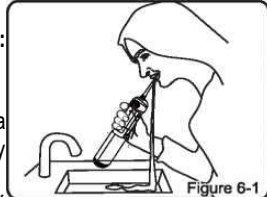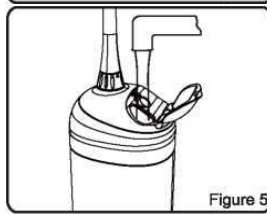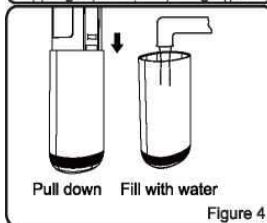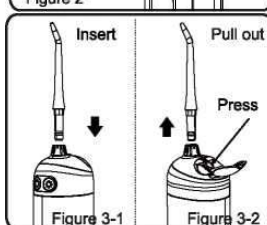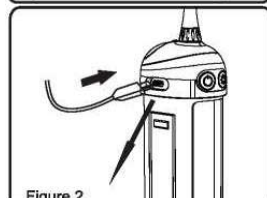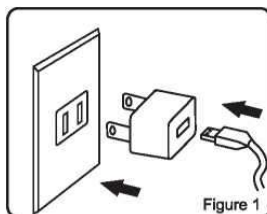

fogszabályozók tisztítására.

**Manuál:** A személyes igényeinkhez igazodó üzemmód.

### Tipp:

Fogászok javaslatára kezdők az első héten a Soft üzemmódot alkalmazzák, majd, ha megszokták, próbáljanak ki más üzemmódokat is.

4. Használat előtt tartsa függőlegesen a szájuhányt, helyezze a fúvókát a szájába, illesse a fogakhoz/ínyhez, és nyissa résnyire a száját, hogy a folyadék távozhasson.

5. Csak ezután nyomja meg a bekapcsológombot (így nem fröcsköli össze magát és környezetét). Használat közben az alábbiakra fordítson különös figyelmet:

- A vízszugár derékszöget kell, hogy bezárjon a fogakkal vagy az ínnyel;
- Haladjon lassan végig a fogsorán, hogy minden fogat és a fogközöket is megfelelően megtisztítsa;
- A fúvóka illeszkedjen az íny széléhez, és legyen párhuzamos az ínnyel;

### Tipp:

Ne irányítsa a vízszugarat közvetlenül a fogínytasakokba!

Használat után nyomja meg a főkapcsolót a kikapcsoláshoz.

A beépített időzítő 2 perc után automatikusan kikapcsol, de a főkapcsolóval újraindíthatja.

### Használat utáni teendők:

- Üritse ki a víztartályt.
- A főkapcsolóval ürítse ki a bennmaradt folyadékot.
- Kapcsolja ki a készüléket, csukja össze, vegye le a fúvókát és helyezze a kifúvó nyílás belsejébe.
- Törölje szárazra a szájuhányt.

### Tipp:






A vízmaradék kiürítésével elkerülhető a baktériumok elszaporodása. Ha sokáig nem használja a készüléket, akkor száradás után tisztítsa meg.

### A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A készüléket tiszta vízzel vagy semleges tisztítószerrel tisztítsa. Ne használjon maró, dörzsölő anyagokat, vagy 50 °C-nál melegebb vizet!

### A készülék tisztítása:

- Száraz, vagy nedves kendővel tisztítsa a készülék testét.

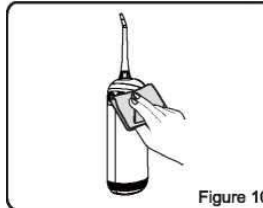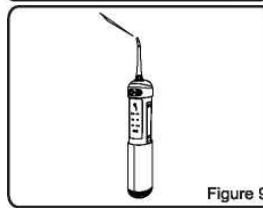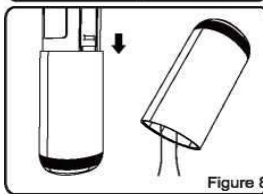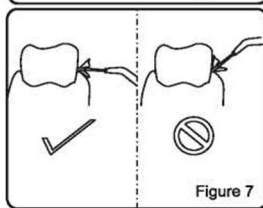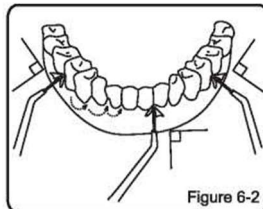

- Ne merítse a készüléket folyadékba tisztítás céljából!

### A víztartály tisztítása:

- A tartály száraz vagy nedves kendővel tisztítható, vagy a főegységről leválasztva tiszta vízzel előblíthető.
- Ha sokáig nem használja a készüléket, kérjük, tisztítsa meg a tartályt.

### A fúvóka tisztítása:

- Száraz vagy nedves kendővel, vagy leválasztva tiszta vízzel öblítse.
- Ne hajlítsa, húzza, csavarja a fúvókát.
- Fogorvosok javaslatára ajánlott a fúvókát félévente cserélni.

### HIBAELHÁRÍTÁS

hibajelenség	lehetséges okok	megoldás
A készülék leáll.	Vásárlás után vagy hosszú állás után alacsony akkumulátor-töltöttség előfordulhat.	Töltsse fel 3 óránál hosszabb idő alatt.
Alacsony víznyomás, vagy nincs vízszugár.	Fúvóka-eltömődés.	Cserélje le a fúvókát.
	A szűrő eltömődött.	Tisztítsa ki a szűrőt.
	Üresen működött.	Távolítsa el és öblítse át a fúvókát. Töltsse fel a tartályt, majd vízszintesen tartva kapcsolja be a készüléket.
Feltöltött akkumulátorral is csak rövid ideig használható.	Az akkumulátor elöregedett.	Keresse fel a forgalmazót.
	Elégtelen töltési idő.	Töltsse több, mint 3 órán keresztül.
A töltés-kijelző nem működik.	Nincs áram alatt a készülék.	Igazítsa meg/cserélje ki a töltő adapter és/vagy kábelt
	Töltési áramkör hiba.	Keresse fel a forgalmazót.

### ÁRTALMATLANÍTÁS

A készülékben található újratölthető akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül. A már nem használt, hibás készüléket ne dobja kommunális hulladékba, hanem a helyi szabályozások és lehetőségek felmérése után a megfelelő módon ártalmatlanítsa (szeméttelpek speciális részlege, lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtők).

### GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén a terméket a körülményeknek megfelelően kicseréljük. Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát.

A következő feltételek garanciavesztéshez vezetnek:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, pl. tápegység vagy aljzat nem megfelelő használatából eredő sérülések stb.

Normál használat okozta öregedés és elhasználódás.

Ha problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.

**Elállás a termék kibontását követően higiéniai okból nem lehetséges.**